

# FLEX 02

Pasientkontrollert flowvelger av oksygentilførselen fra oksygenkonsentratoren. Introduksjon.


Legen din har bestemt at oksygentilskudd hadde vært gunstig for deg, og har foreskrevet to oksygennivåer, en flow for aktivitet og en flow for hvile.

For å unngå å måtte bevege deg bort til oksygenkonsentratoren for å justere flowen har du Flex02 tilkoblet innenfor rekkevidde, for eksempel hengende rundt halsen, slik at du da selv enkelt kan velge mellom disse to flow innstillingene på en sikker måte.

På denne måten kan du, for eksempel når du sitter eller ligger, bytte fra hvilemodus til aktivitetsmodus (se bilde 2) uten å måtte bevege deg og anstrenge deg unødvendig.


Når du endrer fra hvile- til aktivitetsmodus, dreier du bryteren slik at den peker mot det større symbolet. Du merker et kort "puff" som kan føles og er hørbart. Puffet er helt normalt, og viser at aktivitetsflowen har blitt valgt.

Når du endrer Flex02 tilbake fra aktivitet til hvile, dreier du bryteren slik at den peker mot det mindre symbolet (se bilde 4). Du får nå en oksygeflow tilpasset hvile.

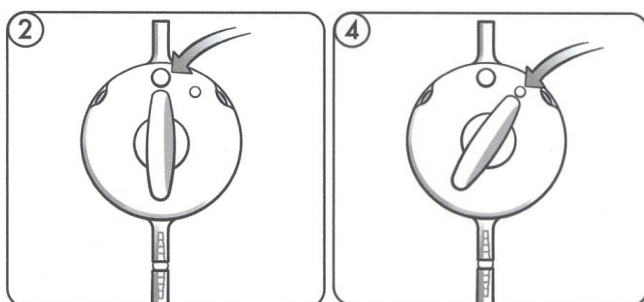

## S-krok

En S-krok kan brukes (ikke inkludert) hvor den ene halvdel festes til et hull i pasientens bukse, belte eller knapphull så nært midtpunktet som mulig vertikalt under Flex02. *Se bilde 10A og 10B.*

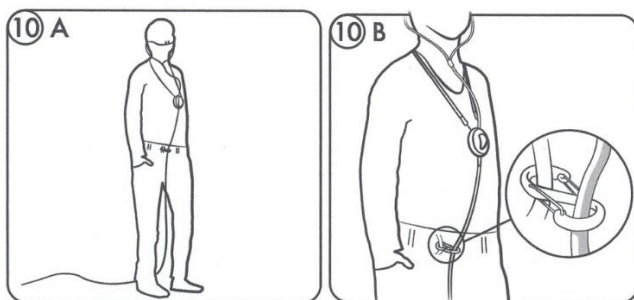


Når brukeren går inn i huset sitt med slangen festet, kan det ofte oppstå situasjoner hvor slangen setter seg fast. For å unngå at dette skjer, må du sørge for at slangen fra oksygenkonsentratoren til FlexO2 kan henge vertikalt, styrt av S-kroken og hengende ned mellom pasientens ben og bakover. *Se bilde 10A*. Når brukeren endrer retning, styrer bena slangen opp og retter det bakover slik at det følger kroppen. På denne måten setter ikke slangen seg fast like lett og dermed reduseres risikoen for å falle. Risikoen for at slangen blir bøyd eller vrir seg er også minimal. Slangen er løst koblet i sin del av S-kroken og kan ikke sette seg fast. Dette forenkler for eksempel toalettbesøk.

## Dusjing

FlexO2 må ikke utsettes for fuktighet. Ved dusjing bør nesegrimen med kort slange byttes til en nesegrime med lengre slange. Dette gjør at enheten kan henges ved siden av dusjen og dermed beskyttes mot fuktighet, samtidig som den er lett tilgjengelig om brukeren må endre flowen.

## Sikkerhetstiltak

Sørg for at enheten er stilt inn for deg og den foreskrevne oksygenflowen før du begynner å bruke den. Sørg for at hvilemodus er valgt når du hviler, for ikke å få et for høyt oksygennivå. Kontroller med jevne mellomrom at det foreskrevne oksygennivået er korrekt. Dette gjøres ved å lese av flowmåleren på oksygenkonsentratoren under hvile og aktivitet. *Se bilde 3*.

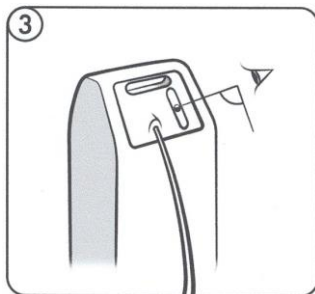

Kontroller regelmessig tilkoblingstussene og deres funksjon slik at koblingene er sikre (ikke løse). Koble en lengre nesegrime til FlexO2 når du legger deg. Utstyret kan henges på en krok ved siden av sengen og være lett tilgjengelig.

## Rengjøring

Tørk av enheten med en fuktig klut. Den tåler vanlige medisinske desinfeksjonsmidler, slik som Virkon, Perasafe eller 70 % sprit.


## Vedlikehold

Inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde.

## Nakkestropp

Enheden leveres med en nakkestropp som festes til de to øvre festepunktene på FlexO2. For å feste en nakkestropp til FlexO2, skilles beslagene i hver ende av stroppen i to deler. Grip den løse delen og tre løyken gjennom hullet i FlexO2. Skyv deretter beslaget gjennom løyken og stram til, slik at beslagene blir sammenføyd. Gjenta med det andre beslaget. Se *bilde 8*.

Stroppen gjør at vekten kan flyttes fra ørene til nakken og balanseres over et større område. Stroppen er justerbar og har en ekstra sikkerhetsmekanisme som skiller stroppen dersom brukeren setter seg fast i noe.

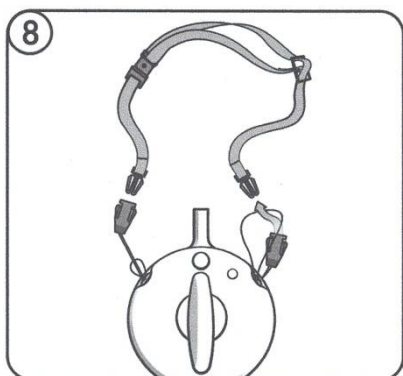

## Driftstid

Etter to (2) måneders skal enheten skiftes ut. Dato for siste bruk finner du på baksiden av enheten. VIKTIG Produsenten garanterer enheten i en periode på maksimalt to (2) måneder etter første gangs bruk. Etter denne perioden skal enheten ikke brukes, og produktet er ikke lenger godkjent for bruk. Ved skade eller mistanke om skade må enheten skiftes ut.

## Avhending.

Enheden skal kastes som brennbart avfall.



LungFlex AB  
Garvaren  
SE-341 60 Ljungby  
[info@lungflex.com](mailto:info@lungflex.com)  
[www.flexo2.com](http://www.flexo2.com)



0402



En-pasients bruk



Rev. 2022-09-04

