

# FLEX 02

## Patientstyrd flödesväljare av syretillförsel från syrgasanrikare.

### Introduktion


Din läkare har fastställt att du behöver ett tillskott av syrgas och har ordinerat två syrgasdoser, en dos när du är i aktivitet och en dos när du är i vila.

För att du ska slippa att förflytta dig själv till syrgasanrikaren för att ställa om dosen, har du fått FlexO2 inkopplad inom räckhåll, exempelvis hängande om halsen, så att du själv kan växla mellan dessa doser på ett säkert sätt.

På så vis kan du till exempel från en sittande eller liggande position, ställa om från viloläge till aktivitetsläge ( se bild 2 ) utan förflyttning och onödig fysisk ansträngning.


När du ställer om från vila till aktivitet ställer du vredet så att den pekar mot den större symbolen. Då känns och hörs en kort "puff". Puffen är helt normal och visar att aktivitetsläget är valt.

När du ändrar tillbaka FlexO2 från aktivitet till vila ställer du vredet så att det pekar mot den mindre symbolen ( se bild 4 ). Du får nu en syrgasdos som är anpassat för vila.

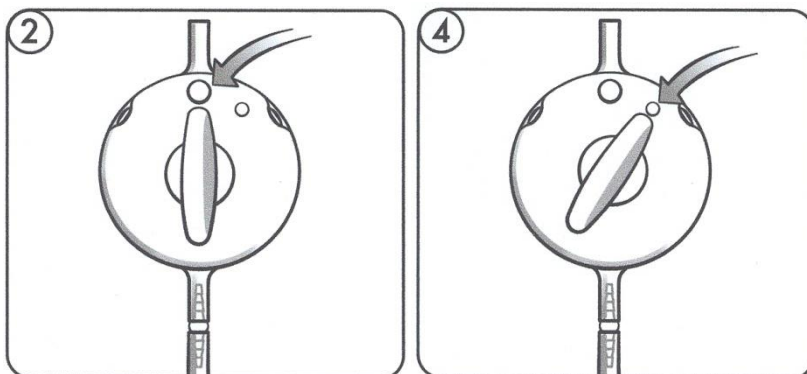

### S-hake

Som tillbehör finns en S-hake där ena halvan fästs i någon hälla i byxan, livremmen, skärpet eller ett knapphål så nära mittlinjen vertikalt under FlexO2 som möjligt. Se bild 10A och 10B.

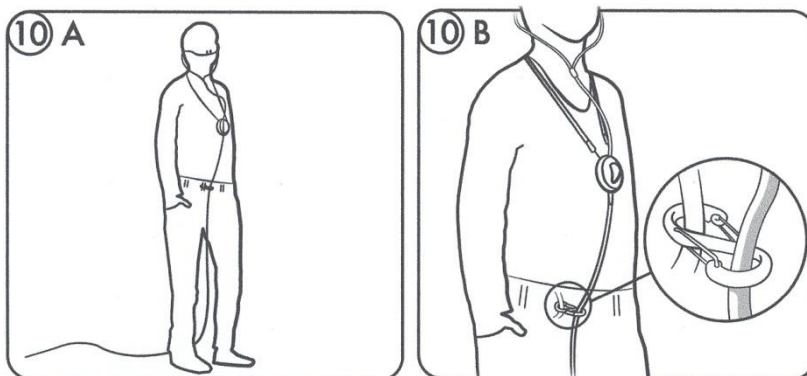

När du går i din bostad med slangen inkopplad uppstår ofta problem med att den vill sno sig. Detta kan undvikas om slangen från syrgasanrikaren till FlexO2 får hänga lodrätt, styras upp av S-haken och släpa mellan benen och bakåt. Se bild 10A.

När du ändrar riktning styrs slangen upp av benen och riktas bakåt och följer med kroppen. Då snor sig inte slangen lika lätt och risken för fallskador minskar.

Risken minskas också för att slangen blir deformerad eller knickad.

Slangen är fritt löpande i sin del av S-haken och kan inte fastna.


Detta förenklar vid exempelvis toalettbesök.

## I duschen

FlexO2 ska skyddas mot väta. När du ska duscha byter du näsgrimman med kort slang till en näsgrimma med längre slang. Detta gör att enheten kan hängas upp vid sidan om duschen och skyddas då mot väta men är samtidigt lätt tillgänglig för att vid behov ändra dosen.

## Försiktighetsåtgärder

Förvissa dig om att enheten är inställd för dig och dina behov av syrgasdos innan du börjar använda utrustningen. Se till att viloläget är valt vid vila, så att du inte får en för hög dos av syrgas. Ha som rutin att regelbundet kontrollera att din ordinerade syrgasnivå stämmer. Det gör du genom att läsa av kulan i flödesmätaren på syrgaskoncentratoren vid vila respektive aktivitet. Se bild 3.

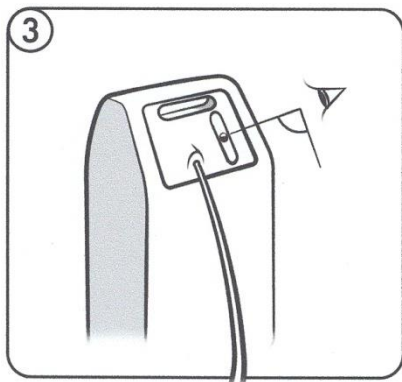

Kontrollera regelbundet att slang och kopplingar är ordentligt fastsatta och inte lossnar.

Koppla gärna en längre gramma till FlexO2 vid sänggående. Då kan utrustningen hängas på en krok vid sidan av sängen och vara lätt tillgänglig.

## Rengöring

Använd fuktad trasa och torka av. Enheten tål desinfektionsmedel som används.

## Service


Enheten innehåller inga delar som kan repareras av dig som användare.

## Nackband

Nackbandet fästs i de två övre fästpunkterna på FlexO2. För att fästa bandet i FlexO2, lossas varje ändbeslag i två delar. Ta den lösa delen, för in öglan genom hålet i FlexO2. Trä sedan beslaget genom öglan och dra åt och för samman beslaget. Gör samma med det andra ändbeslaget. Se bild 8.

Bandet gör att belastningen förflyttas från öronen till nacken och fördelas över en större yta.

Bandet är justerbart och har dessutom en säkerhetsfunktion som delar bandet vid fall om användaren fastnar i något.

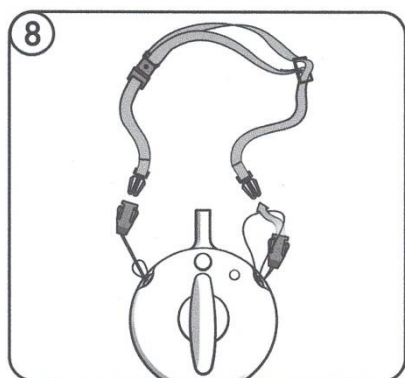

## Användningstid

Enheten ska bytas ut och kasseras efter två (2) månaders användning. Datum för sista användningsdag är noterat på etiketten på enhetens baksida.

OBS! Producenten garanterar enheten i max två (2) månader efter att den tagits i bruk. Efter det får du inte använda enheten och produktansvaret upphör. Om enheten skadas eller vid misstanke om skada, skall du byta ut den.

## Kassering

Enheten sorteras som brännbart avfall.



LungFlex AB  
Garvaren  
SE-341 60 Ljungby  
[info@lungflex.com](mailto:info@lungflex.com)  
[www.flexo2.com](http://www.flexo2.com)



0402



Rev. 2022-09-04